

## RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI

### MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA


Contenitore apposito fornito dal Punto Prelievi.

### MODALITA' DI RACCOLTA E CONSEGNA

1. Raccogliere le feci su una superficie asciutta (ad esempio vasino per bambini, padella da letto, foglio di plastica).
2. Svitare ed estrarre il tappo verde del contenitore, senza rovesciare il liquido contenuto all'interno.



3. Strisciare più volte l'asticella sopra le feci e immergerla in due/tre punti, in modo che la quantità di feci necessaria all'esame rimanga adesa all'asticella:

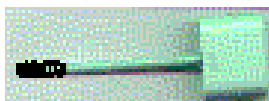

4. Inserire l'asticella nel contenitore, allineare il tappo col flacone e premere fino a sentire il clic:



5. Agitare molto bene.
6. Consegnare al Punto prelievi entro 8 giorni dalla raccolta (conservare in frigorifero).  
Se la ricerca viene eseguita su 3 campioni, raccogliere le feci di 3 scariche diverse e consegnarli tutti insieme.

### AVVERTENZE

- Non eseguire il test durante il periodo mestruale, né se affetti da emorroidi.
- Evitare di contaminare le feci con le urine.
- Il contenitore contiene meno dell'1% di sodio azide. Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Se il liquido entrasse negli occhi o in bocca o se venisse in contatto con la cute, lavare immediatamente e completamente la parte interessata con acqua corrente. Eventualmente contattare un medico.